


HemoCat

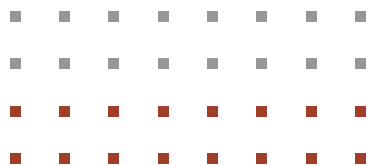

Soluções em Terapia Infusional

Bullpup - Mini Midline

Conheça o Mini Midline Bullpup M/29

O Mini Midline – BullPup é o primeiro cateter periférico de média a longa permanência, que possui um sistema simples que permite que o profissional de enfermagem possa inseri-lo normalmente como um cateter periférico comum e sem dificuldades em pacientes que necessitam de uma terapia intravenosa periférica prolongada e/ou pacientes com acesso venoso difícil.

Preenchendo uma grande Lacuna do Acesso Intravenoso (IV)

- ✓ 90% dos pacientes internados necessitam de um acesso IV¹;
- ✓ O tempo médio de internação é de 7 dias¹⁻²;
- ✓ O tempo de permanência de um cateter periférico padrão é de 48 a 72 horas³;
- ✓ O sucesso na primeira inserção ainda é baixo²⁻³.



Compatível com ultrassom (US)

Dispositivo de segurança

8,5 cm - cateter de poliuretano

Introdutor de aderência - reduz contaminação

Agulha entalhada para rápida visualização do refluxo de sangue



Com um tempo de permanência de até 29 dias, o **Mini Midline BullPup** reduz várias substituições e reinserção de novos cateteres – resultando em maior satisfação dos pacientes e economia significativa de custos para o hospital.

Simplicidade e custo de um Cateter Venoso Periférico com performance de um cateter Midline

- Cateter de 8,5 cm - garante o posicionamento da ponta e maior taxas de permanência devido a maior estabilidade;
- Acesso as veias profundas, melhor fluxo e maior hemodiluição dos medicamentos;
- Inserido como um cateter intravenoso periférico;
- Cateter sobre a agulha, sem fio guia e com treinamento (simples);
- Tempo de permanência de até 29 dias, reduzindo a necessidade de troca do cateter entre 48 a 72 horas;
- Introdutor de aderência exclusivo que não permite que as mãos do profissional toquem o cateter antes da punção.



A inserção rápida e simples reduz o tempo de manuseio e os riscos associados a complicações e aumento de custos.



Especificações do Produto



Categoria: Cateter Venoso Periférico Longo

Indicação Clínica: Terapia intravenosa periféricamente compatível

Tempo de permanência: Até 29 dias

Tempo de inserção: <1 minuto

Pressão: 325PSI (TC, RNM, CENTILOGRAFIA)

Compatível com ultrassom (US) auxiliando na visualização durante o processo de inserção e, portanto, ajudando a aumentar a chance de um posicionamento bem-sucedido.

Referências e Informações Técnicas

Cateter Mini Midline BullPup M29 Safety IV

Tamanho	Referência	Cor	Anvisa
22G	200.110.011	Azul	81325990103
20G	200.110.010	Rosa	81325990103
18G	200.110.009	Verde	81325990103

HemoCat

♥ Colocamos nosso coração
em tudo o que fazemos.

1. Gorski L, Hadaway L, Hagle ME, McGoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion therapy standards of practice. J Infus Nurs. 2016;39(suppl 1):S1-S159.
2. Scoppettuolo G, Pittiruti M, Pitoni S, Laura D, Alessandro E, et al. (2016) Ultrasound-guided short midline catheters for difficult venous access in the emergency department: a retrospective analysis. Int J Emerg Med 9(1): 3.
3. Meyer P, Cronier P, Rousseau H, Vicaut E, Choukroun G, et al. (2014) Difficult peripheral venous access: clinical evaluation of a catheter inserted with the Seldinger method under ultrasound guidance. J Crit Care 29(5): 823-827.

Hemocat Matriz

Rua Ewerton Visco, 324, 12º Andar, Caminho das
Árvores, Salvador - BA - Brasil - CEP 41.820-022
Tel.: 71 3341-4775

Hemocat Sudeste

Rua do Paraíso, 441 - Paraíso
São Paulo - SP - CEP 04.103-000
Tel.: 11 3884-7812

Site: www.hemocat.com.br

Facebook: [/hemocatbrasil](https://www.facebook.com/hemocatbrasil)

LinkedIn: [/company/hemocatbrasil](https://www.linkedin.com/company/hemocatbrasil)